



KOMBAJN KOSMETYCZNY 4W1 BEAUTY CUBE

3490 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Polski, ergonomiczny i niezawodny kombajn kosmetyczny.

FUNKCJE URZĄDZENIA

- * mikrodermabrazja diamentowa,
- * peeling kawitacyjny,
- * ultradźwięki (twarz i ciało),
- * dermomasaż.

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia. W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania

kolagenu.

Urządzenie wyposażone jest wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą.

Zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo, co daje nam możliwość jej najdokładniejszego doboru, inaczej niż jest to w urządzeniach typu analogowego.

DZIAŁANIE

- * rozjaśnianie przebarwień skóry,
- * spłylenie blizn,
- * stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
- * oczyszczanie cery,
- * likwidacja zmarszczek.

PEELING KAWITACYJNY + ULTRADŹWIĘKI

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają minieksplzjom, wytwarzając mikroenergię, która usuwa martwe już korneocyty.

DERMOMASAŻER

Urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomassager jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

Urządzenie wyposażone jest wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą.

Zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo, co daje nam możliwość jej najdokładniejszego doboru, inaczej niż jest to w urządzeniach typu analogowego.

DZIAŁANIE

- * modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- * zmniejszenie cellulitu,
- * ujędrnienie ciała,
- * wspomaganie drenażu limfatycznego,
- * poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- * spłylenie blizn,
- * niwelacja rozstępów,
- * możliwość stosowania wraz z kosmetykami,

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA


czas pracy	0-30 min
moc	60 W
bezpiecznik	2A
napięcie	230 V-50Hz
maksymalne podciśnienie mierzone na zakończeniu głowicy	-600 hPa (-0.06 MPa)

PEELING KAWITACYJNY + ULTRADŹWIĘKI

czas pracy	0-30 min
częstotliwość głowic	UD - 1Mhz
max. moc głowic	UD – 1W/cm2
bezpiecznik	1,2A
napięcie	230 V-50Hz
łopatka do peelingu	25kHz
	łopatka do pracy ciągłej

DERMOMASAŻER

czas pracy	0-60 min
bezpiecznik	1,6A
napięcie	230 V-50Hz
moc urządzenia	60 W
podciśnienie	5-20 inHg

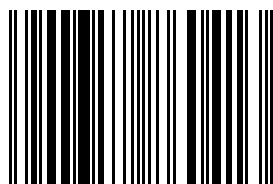

5904358860413