



KOMBAJN KOSMETYCZNY MOBILNY 12W1 + OXYBRAZJA

16999 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

KOMBAJNY MOBILNE NAJNOWSZEJ GENERACJI (WYPRODUKOWANE W POLSCE).

CO WYRÓŻNIA NASZĄ OFERTĘ?

- Gwarancja 24 miesiące,
- Bezpłatne konsultacje z serwisantem,
- BEZPŁATNE, PROFESJONALNE SZKOLENIE
(WŁĄCZNIE Z OPIEKĄ TELEFONICZNĄ PO SZKOLENIU),
- Bezpłatne skrypty szkoleniowe,

-Wieloletnie doświadczenie.

CO WYRÓŻNIA NASZE URZĄDZENIA?

-Zgodność aparatury z normami europejskimi potwierdzona deklaracjami zgodności producenta,

-Urządzenia zostały zaprojektowane od podstaw w Polsce, w oparciu tylko i wyłącznie o europejskie podzespoły,

-Zastosowanie najwyższej jakości podzespołów i materiałów uczyniło nasze kombajny bezawaryjnymi, zostawiając w tyle podobne urządzenia,

-Nowoczesny design i staranność wykonania, zadowalająca nawet najbardziej wymagających klientów,

-Doskonała proporcja między ceną, jakością, oraz ilością funkcji urządzenia,

-Nowe technologie, dostępne tylko w naszych kombajnach,

-Urządzenia wykonane są na indywidualne zamówienie,

-Tylko u nas możecie Państwo zamówić urządzenie w dowolnej kolorystyce, z logo swojego gabinetu!

OFERTA DOTYCZY KOMBAJNU KOSMETYCZNEGO WYPOSAŻONEGO W FUNKCJE:

SEGMENT NR1

- Peeling kawitacyjny,
- Sonoforeza,
- Światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski,
- Ultradźwięki,
- Galwan,
- Jonoforeza,
- Elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości,
- Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała,
- Mikrodermabrazja diamentowa,
- Analizer skóry.

Segment nr2

- Fale radiowe bipolarne,
- Laser w głowicach fal radiowych,
- Oxybrazja kompresorowa.

OPIS FUNKCJI:

- Peeling kawitacyjny, ultradźwięki, sonoforeza, światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski, galwan, jonoforeza, elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości:

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają mini eksplozjom, wytwarzając mikro energie, która usuwa martwe już keratocyty.

Zalety:

- Mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- Urządzenie do pracy ciągłej,
- 3 rodzaje sterowania łopatką,
- Łączenie z jonoforezą,
- 2 głowice ultradźwiękowe o ergonomicznych kształtach.

- Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała, mezoterapia bezigłowa trychologiczna:

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

Programy zabiegowe:

- Okolice oczu,
- Revital 20+,
- Revital 30+,
- Odmładzanie 40+,
- Lifting 45+,
- Trądzik,
- Ujędrnianie,
- Cellulit,
- Wyszczuplenie,
- Rozstępy,
- Na skórę głowy,
- Na bóle mięśni.

Działanie:

- Błyskawiczny lifting twarzy,
- Poprawa kolorytu skóry,
- Działanie odmładzające i regenerujące,
- Dotlenienie i odżywienie tkanek,
- Modelowanie.

-MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA:

Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia.

W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu.

Działanie:

- Rozjaśnianie przebarwień skóry,
- Spłycenie blizn,
- Stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
- Oczyszczanie cery,
- Likwidacja zmarszczek.

-ANALIZER SKÓRY:

-Fale radiowe Bipolarne, laser w głowicach fal radiowych:

Fale radiowe to urządzenie emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której działaniem biologicznym jest wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwej. W wyniku działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry.

Efekty działania:

- Ujędrnienie i poprawa owalu twarzy,
- Szybkie spłycenie zmarszczek,
- Możliwość stosowania kosmetyków podczas zabiegu,
- Likwidacja cieni pod oczami,
- Odmłodzenie i regeneracja,
- Pobudzenie komórek skóry do produkcji kolagenu i elastyny,
- Ujędrnienie i modelowanie, poprawa ukrwienia wybranych partii ciała,
- Skuteczna walka z cellulitem.

-OXYBRAZJA – PEELING WODNO-TLENOWY, MEZOTERAPIA WODNO-TLENOWA:

Oksybrazja, Hydrabrazja, Peeling Wodno-tlenowy jest innowacyjnym zabiegiem, wykonywanym przez dwufazowy strumień składający się z mikrokropelek soli fizjologicznej oraz powietrza. Oksybrazja ze względu na brak wywoływanych podrażnień po zabiegu nazywana jest "miękką" dermabrazją.

Obok działania peelingu, Oksybrazja nawilża oraz dotlenia skórę.

Efekt końcowy peelingu wodno-tlenowego, porównywany jest często do mikrodermabrazji korundowej.

Warto zwrócić uwagę, że ze względu na brak mechanicznego ścierania, zabiegowi mogą poddawać się osoby cierpiące na cerę naczynkową, skłoną do rumienia. Oksybrazja jest również wskazana dla osób z trądzikiem. Zabieg w większości przypadków jest bardzo dobrze odbierany przez klientki, nie łączy się z dyskomfortem jaki można odczuwać przy dermabrazji diamentowej.

Skóra po zabiegu jest gładka, delikatna, dotleniona i nawilżona.

KOMBAJNY MOBILNE NAJNOWSZEJ GENERACJI Z ROCZNIKA 2017
(WYPRODUKOWANE W POLSCE)

Czas pracy	0-30 min
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz

PEELING KAWITACYJNY/ULTRADŹWIĘKI

Częstotliwość peelingu kawitacyjnego	25KHz
Światłoterapia	kolor czerwony
Światłoterapia	kolor niebieski
Prąd galwaniczny	+/- 6mA
Częstotliwość ultradźwięków	1Mhz
Max. moc głowic UD	1W/cm2

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TWARZY I CIAŁA, MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TRYCHOLOGICZNA

Zakres czasu pracy	30 sekund – 40 minut (ze skokiem co 30 sekund)
Częstotliwość ultradźwiękowa	1 MHz
Napięcie wejściowe	220 – 230V
Moc wyjściowa	0,04 W/cm ² – 0,28 W/cm ²
Zakres natężenia	0,0 mA – 6,4 mA
Zakres skali pulsacji(wypełnienia)	5% – 100%

FALE RADIOWE BIPOLARNE, LASER W GŁOWICACH FAL RADIOWYCH


Czas pracy	0-30 min
Bezpiecznik	1,6A
Napięcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	120W
Częstotliwość	1MHz
Intensywność	5-100W

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Czas pracy	0-30 min
Moc	60 W
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz
Max podciśnienie mierzone na zakończeniu głowicy	-600 hPa (-0.06 MPa)

OXYBRAZJA

Pobór mocy	100W
Napięcie	220-230V
Częstotliwość	50-60Hz
Ciśnienie	0-2Bar
Regulacja ciśnienia	cyfrowa
Waga	6kg

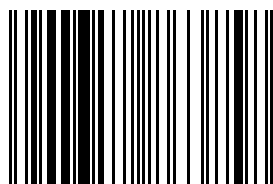

5904358863858