



KOMBAJN KOSMETYCZNY MOBILNY 20W1 + OXYBRAZJA + HIFU TWARZ/CIAŁO

37400 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

KOMBAJNY MOBILNE NAJNOWSZEJ GENERACJI (WYPRODUKOWANE W POLSCE).

CO WYRÓŻNIA NASZĄ OFERTĘ?

- Gwarancja 24 miesiące,
- Bezpłatne konsultacje z serwisantem,
- Bezpłatne, profesjonalne szkolenie
(włącznie z opieką telefoniczną po szkoleniu),

- Bezpłatne skrypty szkoleniowe,
- Wieloletnie doświadczenie.

CO WYRÓŻNIA NASZE URZĄDZENIA?

- Zgodność aparatury z normami europejskimi potwierdzona deklaracjami zgodności producenta,
- Urządzenia zostały zaprojektowane od podstaw w Polsce, w oparciu tylko i wyłącznie o europejskie podzespoły,
- Zastosowanie najwyższej jakości podzespołów i materiałów uczyniło nasze kombajny bezawaryjnymi, zostawiając w tyle podobne urządzenia,
- Nowoczesny design i staranność wykonania, zadowalająca nawet najbardziej wymagających klientów,
- Doskonała proporcja między ceną, jakością, oraz ilością funkcji urządzenia,
- Nowe technologie, dostępne tylko w naszych kombajnach,
- Urządzenia wykonane są na indywidualne zamówienie,
- Tylko u nas możecie Państwo zamówić urządzenie w dowolnej kolorystyce, z logo swojego gabinetu!

Oferta dotyczy kombajnu kosmetycznego wyposażonego w funkcje:

SEGMENT NR1

- Peeling kawitacyjny,
- Sonoforeza,
- Światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski,
- Ultradźwięki,
- Galwan,
- Jonoforeza,
- Elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości,
- Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała,
- Mezoterapia bezigłowa trychologiczna,
- Mikrodermabrazja diamentowa,
- Dermomasaż,
- Analizer skóry,
- Podciśnieniowy lifting z TENS.
- HIFU Twarz/Ciało

SEGMENT NR2

- Fale radiowe bipolarne,
- Laser w głowicach fal radiowych,
- Mezoterapia mikroigłowa,
- Makijaż permanentny,
- Liposukcja ultradźwiękowa,
- Głowica infrared,
- Oxybrazja kompresorowa.

OPIS FUNKCJI:

-Peeling kawitacyjny, ultradźwięki, sonoforeza, światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski, galwan, jonoforeza, elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości:

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają mini eksplozjom, wytwarzając mikro energię, która usuwa martwe już korneocyty.

Zalety:

- Mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- Urządzenie do pracy ciągłej,
- 3 rodzaje sterowania łopatką,
- Łączenie z jonoforezą,
- .-2 głowice ultradźwiękowe o ergonomicznych kształtach.

-Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała, mezoterapia bezigłowa trychologiczna:

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

Programy zabiegowe:

- Okolice oczu,
- Revital 20+,
- Revital 30+,
- Odmładzanie 40+,
- Lifting 45+,
- Trądzik,
- Ujędrnianie,
- Cellulit,
- Wyszczuplenie,
- Rozstępy,
- Na skórę głowy,
- Na bóle mięśni.

Działanie:

- Błyskawiczny lifting twarzy,
- Poprawa kolorytu skóry,
- Działanie odmładzające i regenerujące,
- Dotlenienie i odżywienie tkanek,
- Modelowanie.

-MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA:

Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia.

W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu.

Działanie:

- Rozjaśnianie przebarwień skóry,
- Spłycenie blizn,
- Stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
- Oczyszczanie cery,
- Likwidacja zmarszczek.

-DERMOMASAŻER:

Dermomasażer to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze.

Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

Działanie:

- Modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- Zmniejszenie cellulitu,
- Ujędrnienie ciała,
- Wspomaganie drenażu limfatycznego,
- Poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- Spłycenie blizn,
- Niwelacja rozstępów,
- Możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

-ANALIZER SKÓRY:

- PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS:

Urządzenie to łączy dwie metody oddziaływania na skórę by zwiększyć i wzmocnić efekt liftingu. Masaż próżniowy w połączeniu z elektrostymulacją TENS działa wzmacniająco na mięśnie twarzy, ujędrnia skórę oraz stymuluje układ limfatyczny. Skrót TENS wywodzi się od (transcutaneous electrical nerve stimulation – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów). Metoda TENS, jest znana od ponad 30 lat i szeroko stosowana na świecie. W jej wykorzystaniu przodują: Niemcy, Anglia, Francja, Szwecja, Dania, USA, Japonia, Izrael, Rosja. Prowadzi się tam najwięcej badań nad wykorzystaniem TENS w leczeniu zaburzeń funkcji mięśni i nerwów.

Działanie:

- Pobudzeniu miejscowego ukrwienia – przyspieszenie gojenia, usunięcie obrzęków,
- Zapobieganie zanikom mięśniowym – utrzymanie mięśni w ruchu bez obciążania stawów,
- Lepsze odżywianie tkanek,
- Szybkie usunięcie produktów przemiany materii i procesów zapalnych,
- Działanie przeciwbólowe,
- Regulowanie napięcia.

Masaż próżniowy jest połączeniem masażu mechanicznego z podciśnieniem. Jednocześnie podczas zabiegu odciągane są fałdy skóry (zassanie) i rolowane ruchomymi rolkami. Masaż ten często nazywany jest lipomasażem. Podczas masażu całe ciało, z wyjątkiem piersi, masuje się przy pomocy specjalnej głowicy wyposażonej w ruchome rolki i rodzaj ssącej rury. Rolki obracają się wokół własnych osi i masują zassany do głowicy fałd skóry. Poprawia to krążenie krwi i przepycha limfę.

-Fale radiowe Bipolarne, laser w głowicach fal radiowych:

Fale radiowe to urządzenie emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której działaniem biologicznym jest wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwej. W wyniku działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry.

Efekty działania:

- Ujędrnienie i poprawa owalu twarzy,
- Szybkie spłycenie zmarszczek,
- Możliwość stosowania kosmetyków podczas zabiegu,
- Likwidacja cieni pod oczami,
- Odmłodzenie i regeneracja,
- Pobudzenie komórek skóry do produkcji kolagenu i elastyny,
- Ujędrnienie i modelowanie, poprawa ukrwienia wybranych partii ciała,
- Skuteczna walka z cellulitem.

-MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA, MAKIJAŻ PERMANENTNY:

Nowoczesny system makijażu permanentnego + mezoterapii mikroigłowej z laserem biostymulacyjnym. Gwarantuje precyzyjną i stabilną pracę z dokładną regulacją wysunięcia igły. Dzięki temu nie ma obawy, że barwnik wprowadzony zostanie za głęboko i pozostawi nierówny makijaż. Umożliwia wykonanie konturu wraz z cieniowaniem.

Zastosowanie innowacyjnego materiału odpornego na ścieranie i czynniki zewnętrzne TECAPEEC gwarantuje bardzo długą i niezawodną pracę urządzenia.

Aparat wzbogacony jest o LASER BIOSTYMULUJĄCY przyspieszający gojenie skóry.

Zalety Urządzenia:

- Elektronicznie stabilizowana prędkość nakłuć,
- Precyzyjna regulacja pracy,
- Cyfrowy panel sterujący,
- Laser biostymulujący,
- Ergonomiczny kształt rączki.

-LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA, GŁOWICA INFRARED:

Poprzez działanie ultradźwiękami o określonej, niskiej częstotliwości wpływamy na powstanie zjawiska kawitacji. Wytworzona energia powoduje rozbięcie komórki tłuszczowej, a uwolnione w ten sposób tłuszcze (wolne kwasy tłuszczowe i glicerol) są głównie transportowane przez układ naczyniowy i limfatyczny do wątroby, gdzie ulegają przemianie materii i stają się źródłem energii. W ten sposób można przyspieszyć efekt

redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej z „trudnych” obszarów, np. ud, pośladków, talii, bioder czy ramion.

Urządzenie posiada również głowicę na podczerwień IR – ogrzanie partii przed jej nadźwiękowieniem, sprzyja „upłynnieniu tkanki tłuszczowej” i głębszemu wnikananiu fali ultradźwiękowej. Połączenie tych dwóch bodźców sprawia, że efekty kuracji są bardzo widoczne a zabieg jest doskonałą alternatywą dla interwencji chirurgicznych.

Działanie:

- Niwelacja tkanki tłuszczowej,
- Odmłodzenie i regeneracja,
- Dotlenienie i odżywienie tkanek,
- Modelowanie partii ciała.

-OXYBRAZJA – PEELING WODNO-TLENOWY, MEZOTERAPIA WODNO-TLENOWA:

Oksybrzja, Hydrabrazja, Peeling Wodno-tlenowy jest innowacyjnym zabiegiem, wykonywanym przez dwufazowy strumień składający się z mikrokropelek soli fizjologicznej oraz powietrza. Oksybrzja ze względu na brak wywoływanych podrażnień po zabiegu nazywana jest "miękką" dermabrazją.

Obok działania peelingu, Oksybrzja nawilża oraz dotlenia skórę.

Efekt końcowy peelingu wodno-tlenowego, porównywany jest często do mikrodermabrazji korundowej.

Warto zwrócić uwagę, że ze względu na brak mechanicznego ścierania, zabiegowi mogą poddawać się osoby cierpiące na cerę naczynkową, skłonną do rumienia. Oksybrzja jest również wskazana dla osób z trądzikiem. Zabieg w większości przypadków jest bardzo dobrze odbierany przez klientki, nie łączy się z dyskomfortem jaki można odczuwać przy dermabrazji diamentowej.

Skóra po zabiegu jest gładka, delikatna, dotleniona i nawilżona.

-HIFU TWARZ/CIAŁO (2 GŁOWICE BEZKARTRIDŻOWE)

HIFU Oznacza działanie poprzez skoncentrowane i intensywne fale ultradźwiękowe. Sama technologia HIFU stosowana jest medycynie już od 20 lat do usuwania guzów, m.in. raka prostaty. Od 4 lat wykorzystywana jest w medycynie estetycznej i jej popularność wzrasta. Energia fali ultradźwiękowej wprawiając komórki w drgania, doprowadza do ich rozgrzania w temp. 60-70 st.C co prowadzi do koagulacji tkanek i stymulacji włókien kolagenowych. Ultradźwięki oddziałują jedynie w warstwie mięśniowej SMAS. Inne warstwy skóry nie zostają obciążone. W ten sposób organizm jest pobudzony do podjęcia naturalnej obrony i produkcji nowego kolagenu, a w efekcie do poprawienia napięcia skóry.

Kombajn został wyposażony w dwie głowice zabiegowe:

Twarz - głębokość przenikania 3,0 i 4,5mm

Ciało - głębokość przenikania 8,0 i 13mm

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Czas pracy	0-30 min
Moc	60 W
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz
Max podciśnienie mierzone na zakończeniu głowicy	-600 hPa (-0.06 MPa)

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA, MAKIJAŻ PERMANENTNY

Czas pracy	praca ciągła
Częstotliwość	60b/s-170b/s
Napięcie	230V
Moc	20W
Laser	650nm
Moc lasera	3mW

PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS

Częstotliwość	120 Hz
Natężenie prądu	TENS□□ - 6.4 mA
Podciśnienie	0-0,8 bar

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA, GŁOWICA INFRARED

Moc	35W
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz

DERMOMASAŻER

Czas pracy	0-60 min
Bezpiecznik	1,6A
Napięcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	60W
Podciśnienie	5-20 inHg

OXYBRAZJA


Pobór mocy	100W
Napięcie	220-230V
Częstotliwość	50-60Hz
Ciśnienie	0-2Bar
Regulacja ciśnienia	cyfrowa

HIFU TWARZ

Metoda	Skoncentrowana fala ultradźwiękowa
Częstotliwość	4Mhz/7Mhz
Moc maksymalna na punkt	1,2J
Głębokość przenikania fali	3.0 - 4,5mm
Żywotność głowicy	nieograniczona

HIFU CIAŁO

Metoda	Skoncentrowana fala ultradźwiękowa
Częstotliwość	4Mhz
Moc maksymalna na punkt	2J
Głębokość przenikania fali	8-13mm
Żywotność głowicy	nieograniczona

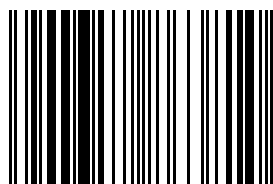

5904358863810